



CLASSY FIT GAINÉ

Le **Classy Fitness Equipment** est un appareil sportif utilisant la technologie EMS (électrostimulation), qui par le biais d'une stimulation électrique provoque une contraction musculaire involontaire.

Comment utiliser le Classy Fitness Equipment ?




Le Classy Fitness Equipment propose **6 programmes** d'EMS différents et **10 niveaux d'intensité**.




Il faut l'appliquer **sur le ventre ou les bras** en fonction du kit utilisé **sur une peau sèche**. Les pads doivent être collés correctement pour une efficacité optimale.



Il est conseillé de l'utiliser **20 minutes par jour**.

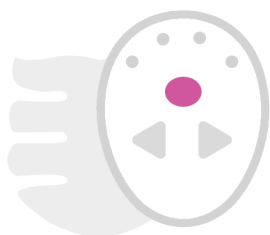

1 Pour allumer l'appareil, appuyez sur le bouton "ON".

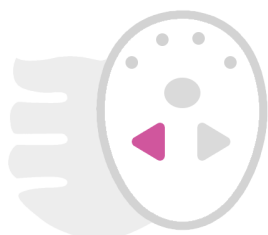

2 Choisir son programme à l'aide du bouton "PROGRAM".

Les voyants 1-2-3-4 vous indiquent le programme choisi.



3 Augmentez l'intensité en appuyant plusieurs fois sur le bouton "ON" ou diminuez la en appuyant plusieurs fois sur le bouton "OFF".



4 Pour éteindre l'appareil, appuyez longuement sur le bouton "OFF".

Après utilisation, pensez à bien recoller le kit sur le support prévu à cet effet.



ATTENTION

Respectez les conseils d'utilisation ci-dessus et les contre-indications spécifiées sur l'emballage.



Shoppez en ligne sur l'application Classy Fit Gainé ou sur [classyfitgainé.fr](https://www.classyfitgainé.fr)



classyfitgainé



sarah-cpc



classyfitgainé